



Interchim® TLC Reader

Directamente unido al puriFlash®, el lector de TLC permite una transferencia TLC-Flash mucho más rápida. Permite un reconocimiento automático de compuestos, frente de solvente y línea de inicio de TLC gracias a diferentes lámparas de 254nm, 365nm y luz visible.


No necesita marcar las manchas manualmente y calcular los Rf

▶ **Ahorre tiempo y obtenga resultados más precisos**

- ▶ Compatible con placas TLC de 5x10 cm
- ▶ Módulo Compacto 10x20x30 cm
- ▶ Totalmente controlado por Intersoft® X "Genius"
- ▶ Medida automática de los valores Rf
- ▶ Transferencia automática de la transposición TLC inteligente
- ▶ La imagen TLC se almacena y se añade al informe o al cuaderno electrónico de laboratorio



TLC Reader

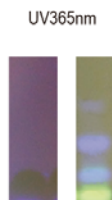

Quantity to purify mg

solvent 1 Cyclohexane Additive

solvent 2 Dichloromethane Additive

Interest compounds

RF	Item	Stock Labo
0.93	PF-15SIHP-F0012	(0)
0.8	IR-20SI-F0012	(0)
0.69	PF-25SIHC-F0012	(0)
0.62	PF-30SIHP-F0012	(0)
0.53	PF-S0SIHP-F0012	(0)
0.47		
0.4		
0.33		
0.28		

go to purification with parameters:

Dichloromethane 50 %
Cyclohexane 50 %

New CCM (64) proposal(s)

Manual Method

Integración Directa de resultados en Intersoft® X "Genius"